

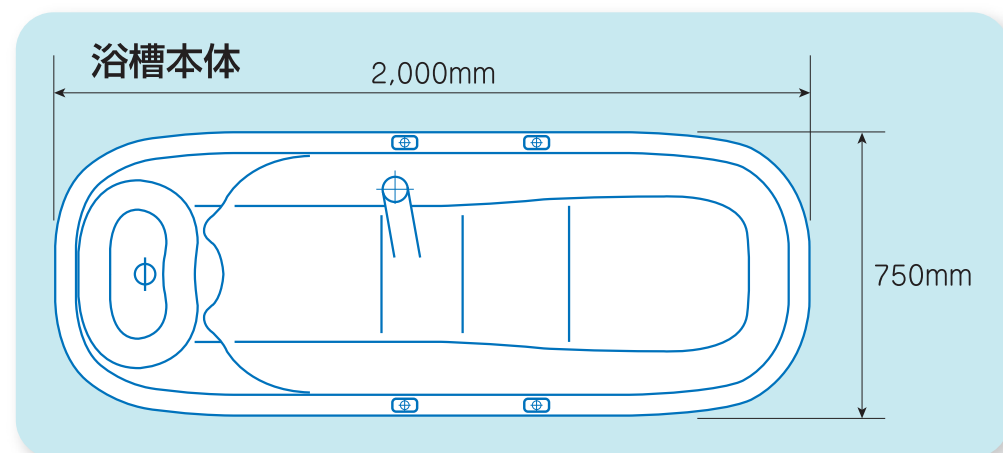


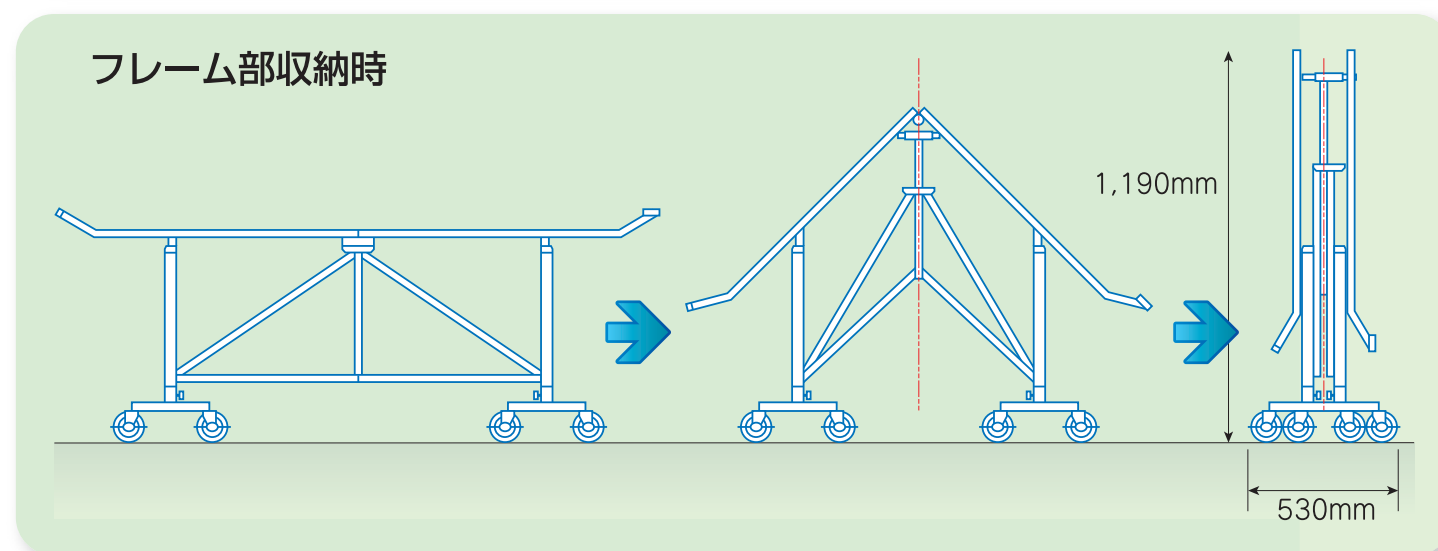

FL-8M
SIZE

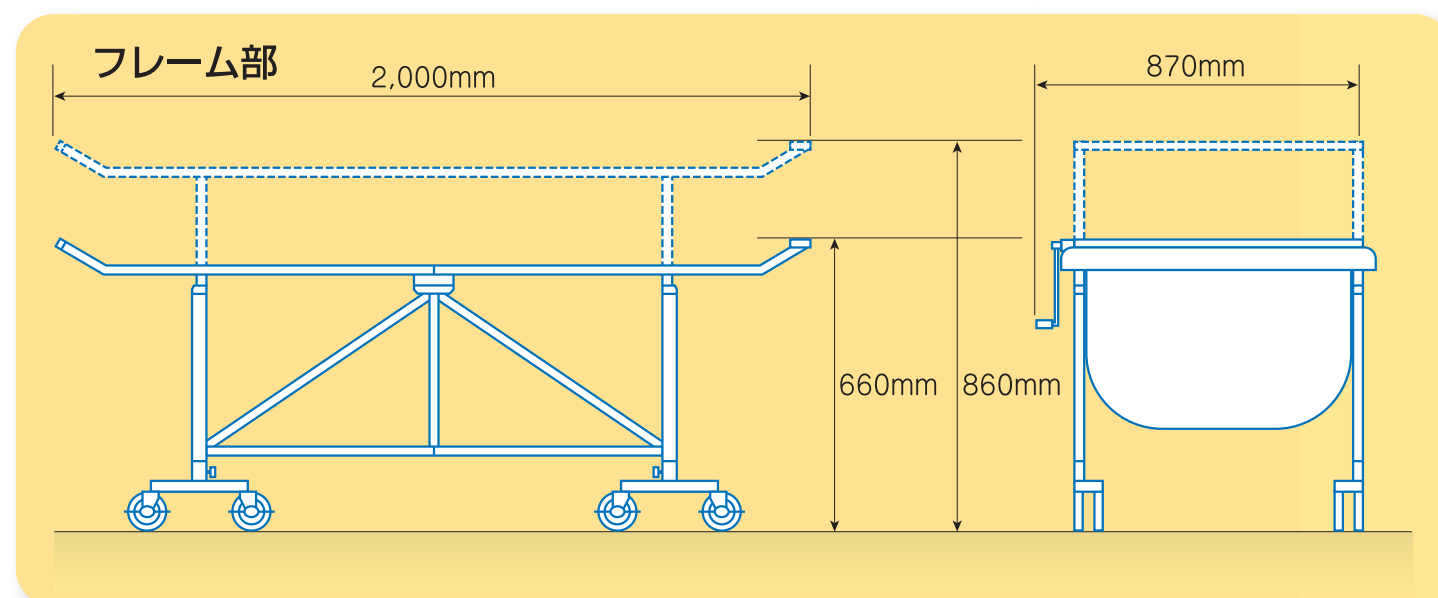

お問い合わせ先

特許出願中

仕様につきましては予告なく変更となる場合がございます。

2015.05.25



やさしさ設計

簡易浴槽
リハビリバス FL-8M



デベロ
(株)

浴槽をお好みの高さに!!

ベッドの高さから➡介助しやすい高さへ



地上高66cmから



地上高86cmまで

移乗しやすい高さに調整できます!

寝ながら湯船に入れるやさしさ設計!!



介助される方の身体的負担が軽減。
入浴される方もより快適に入浴が楽しめます。



快適な入浴・出浴



ハンドルを回すだけ



浴槽内の専用ネットが昇降しますので、
寝たまの姿勢で入浴ができます。



移乗が楽

浴槽の高さが変更できますので

ベッドから浴槽への移乗も楽に行えます。
(タオル移乗の例)

移乗しやすい高さに、
ベッド・浴槽を調整。



介助者の腰の高さで腰痛対策に

移動が楽

キャスター付なので移動も楽々。ストレッチャーいらず。



狭い通路でも



エレベーターでも



安心ロック機能付き

狭いところにも楽々収納

浴槽部、フレームが分離し、フレーム部は折りたたむ事が出来ます。
また浴槽部も10kgと軽量で立てて収納が可能です。



フレーム部は
楽ちん折り畳み

浴槽とフレームが
セパレートできます



空いている
スペースへ収納

特許出願中 仕様につきましては予告なく変更となる場合がございます。

2015.05.25

デベロリハビースバス FL-8M 給湯方法のご紹介

●給湯方法は？



施設の浴室シャワーでの入浴
ならばそのまま給湯




居室の中でも入浴できます!!

※写真はオプション品を装着しております

実用例 ① 浴室のカランにアタッチメントを付けて、かんたん接続→ホースを伸ばし浴槽へ

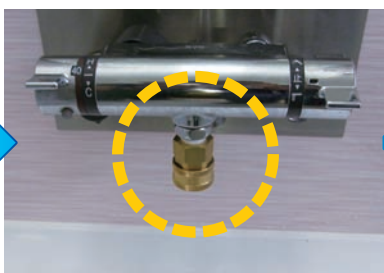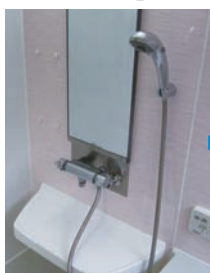

実用例 ② シャワーヘッドを付け替えて、かんたん接続→ホースを伸ばし浴槽へ

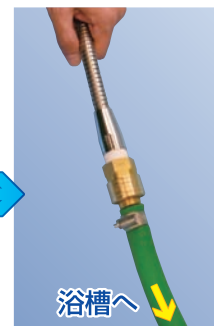

●居室入浴での排水方法は？

ポンプを使用しての排水例

排水ポンプを接続して、
ご都合の場所にへホースを
伸ばして排水。



入浴をより快適に!

FL-8M用 オプション品一覧



給湯アタッチメント シャワー付



給湯用ホース・接続金具は付属しません。

給湯ホース φ15



排水ポンプ PX-62AD2




排水ホース φ25



バスボードD FL-8M用

座位での移動介助に最適

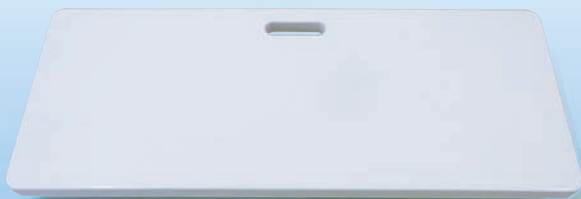

車いすからの
移動例



- 上記以外にも、オプション対応品がございます。
詳しくは、お問い合わせください。

特許出願中

仕様につきましては予告なく変更となる場合がございます。

お問い合わせ先